

LA TECNOLOGIA MICRONEEDLING

- + **Avanzata**
- + **Precisa**
- + **Testata**
- + **Certificata**

FDA

CE 673398

CLASSE IIa

PORTA LA

Bellezza

IN PRIMO PIANO CON
SKINPEN® PRECISION



PROGETTATA E PRODOTTA NEGLI STATI UNITI

SkinPen® Precision - Tecnologia e Validazioni insuperabili*

PRIMO DISPOSITIVO + PROCEDURA APPROVATI DALLA FDA AMERICANA E CON CE MEDICALE DI CLASSE IIa.

Caratteristiche: Efficacia e sicurezza comprovate da anni, pubblicazioni peer-reviewed e 90 studi di validazione.*

Controllo intuitivo della velocità brevettato per il trattamento ottimale su pelli di qualsiasi spessore

- Regolazione automatica della potenza al fine di mantenere 7,000 giri/minuto con qualsiasi spessore cutaneo.
- Nessuna necessità di regolazioni manuali della velocità.

L'unico dispositivo cordless con batteria a ricarica induttiva

- Offre la versatilità e la sicurezza di un dispositivo senza fili evitando così che i cavi entrino in contatto con l'area di trattamento e presentino un rischio di contaminazione incrociata.
- Si ricarica appoggiandolo alla base di ricarica e non è necessario sostituire le batterie da far caricare a parte.
- Funziona alla potenza ottimale indipendentemente dal livello di carica della batteria e viene garantito che il dispositivo sia continuamente ricaricato con la potenza necessaria.

Tecnologia LED Smart per prestazioni ottimali

- Tre Luci Led evidenziano lo stato di carica della batteria mentre si utilizza il dispositivo e mostrano la ricarica in corso mentre SkinPen è appoggiata sulla base.

L'unico manipolo sigillato ad ultrasuoni disponibile sul mercato

- È stato validato che, in combinazione con il rivestimento monouso, non si verifica ingresso di fluidi attraverso la giuntura del rivestimento o la cartuccia del dispositivo.

Manipolo validato per 2.000 ore di utilizzo

- Tecnologia superiore, affidabile, coerente.
- Il motore, con una batteria completamente carica, funziona ininterrottamente per 6/7 ore.

Design ergonomico, leggero e facile da utilizzare

- Testato da medici e progettato per un comfort ottimale dell'utente.
- Perfettamente bilanciato per evitare affaticamento.
- Il dispositivo più leggero disponibile sul mercato 141,7g.**
- Nessun pulsante ingombrante per la regolazione della velocità. La tecnologia intuitiva di controllo della velocità lo fa al posto tuo in modo ottimale.



* Dati in archivio. Per un riepilogo completo della sperimentazione clinica e informazioni su come utilizzare il dispositivo con microneedling SkinPen Precision, visitare skinpen.com/International.

** Tra i dispositivi cordless di Classe IIa approvati dalla FDA e con marchio CE.

LA TECNOLOGIA SENZA RIVALI DI CUI CI SI PUÒ FIDARE

Cartuccia avanzata approvata dalla FDA americana, progettata e prodotta negli Stati Uniti.

Nessun rischio di contaminazione incrociata

- Funzione di blocco monouso validata: nessuna penetrazione di fluidi come sangue o siero.
- Ogni cartuccia è progettata per uso singolo e in sicurezza.

Validata per penetrare alla profondità impostata

- Garantisce una penetrazione in profondità precisa e affidabile fino a 2,5 mm.
- Validata per funzionare alla profondità specificata ritenuta sicura per il paziente.



Penetrazione e retrazione degli aghi controllati durante tutta la durata del movimento

- Il meccanismo di reciprocazione del movimento è alloggiato nella cartuccia di trattamento monouso per una calibrazione sempre precisa.
- A differenza di altri strumenti inaffidabili che utilizzano per la reciprocazione un sistema a molla, Skin Pen Precision utilizza un sistema di reciprocazione a biella ancorata al fusto in modo che ci sia una penetrazione e retrazione completa e costante per ogni rotazione.

Aghi validati per rimanere affilati per almeno 80 minuti di utilizzo

- Quattordici aghi chirurgici in acciaio inossidabile validati per affilatura, durata e profondità di penetrazione.
- Gli aghi hanno prestazioni costanti indipendentemente dallo spessore o dalla consistenza della pelle formando 1600 micro canali al secondo.





Cicatrici d'acne
Linee Sottili e Rughe
Melasma
Vitiligine
Lentigo Solaris

SkinPen® Precision dispositivo medico CE di classe IIa:


SkinPen Precision è un dispositivo medico di microneedling indicato per il trattamento di cicatrici d'acne e per migliorare l'aspetto di linee sottili e rughe su viso, collo, décolleté e mani. Il trattamento è indicato anche per le discromie (Melasma, Vitiligine e Lentigo Solaris)

SKINPEN® PRECISION PER STIMOLARE LA RIGENERAZIONE DELLA PELLE

4 Trattamenti

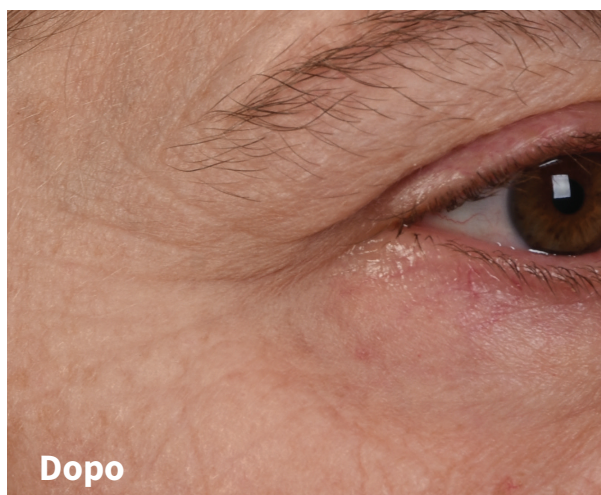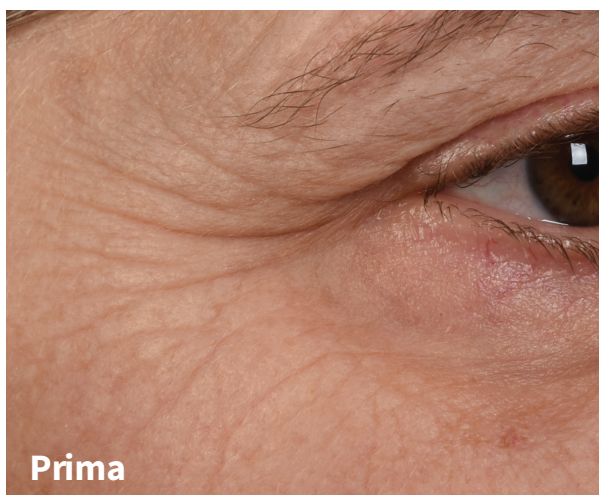

5 Trattamenti

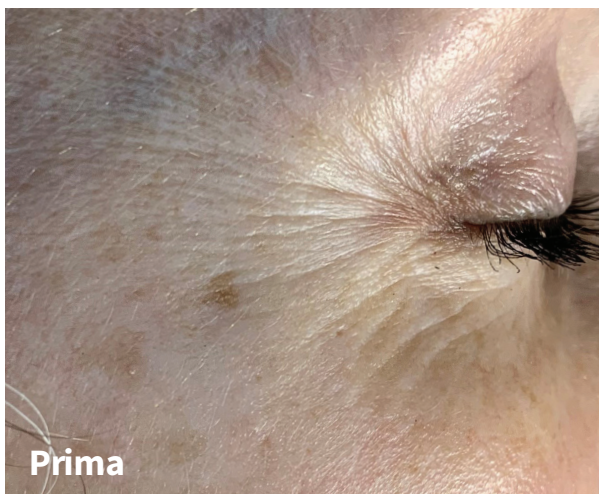

Per gentile concessione di: SkinPen Precision clinical trial.

CICATRICI DA ACNE

6 Trattamenti



Per gentile concessione di: Cathy A. Presnick, Licensed Aesthetician; A Perfect Complexion, LLC, Melbourne, FL

